



BIOSTIM™ 2.2+

Et terapeutisk system for biofeedback og stimulering


BioStim™ er et behandlingssystem med biofeedback og elektrostimulering for rehabilitering av bekkenbunnen, utviklet og produsert av den franske produsenten Mazet Santé. Systemet består av en signalforsterker med to kanaler EMG (A og B) som kan brukes til å stimulere bekkenbunnen vaginalt eller anal. BioStim 2.2+ har også to kanaler til trykk som et supplement til EMG hvis man foretrekker dette alternativet.

BioStim™ -programmet viser og tar opp en eller to EMG-kanaler med mulighet for flere forskjellige animasjoner. Det finnes 16 forskjellige treningsbaner å velge mellom. Det er mulig å justere EMG-signalene automatisk eller manuelt før behandlingen startes slik at pasienten vet hvilket mål som er satt før hver treningsøkt.

BioStim™ har en stimuleringsfunksjon med to kanaler med bifasiske pulsstrømmer som brukes til å behandle bl.a. inkontinens. Hovedenheten kobles til et datasystem, f.eks. en alt-i-ett datamaskin som på bildet nedenfor eller et hvilket som helst annet datasystem.

BioStim™ 2.2+ følgende fordeler:

- Enkelt og brukervennlig system for biofeedback med EMG og/eller trykk
- 16 forskjellige treningsbaner med fantasifull animasjon
- Stimuleringsfunksjon for rehabilitering av bekkenbunnen
- Pasienten kan under stimulering selv regulere strømstyrke eller stoppe behandlingen med hjelp av fjernkontrollen

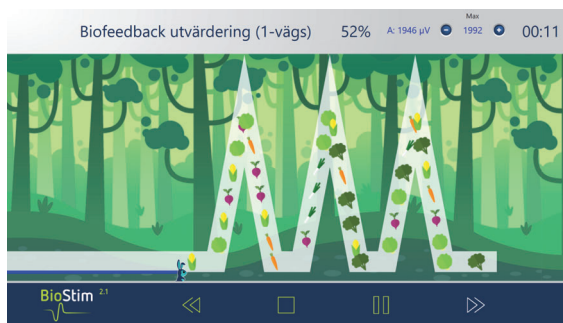

SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
Mazet Santé
<https://mazetsante.fr>
info@mazetsante.fr

