


Cateteri per cistomanometria e profilo pressorio uretrale Cystomanometry and urethral pressure profile (UPP) Measurement Catheters

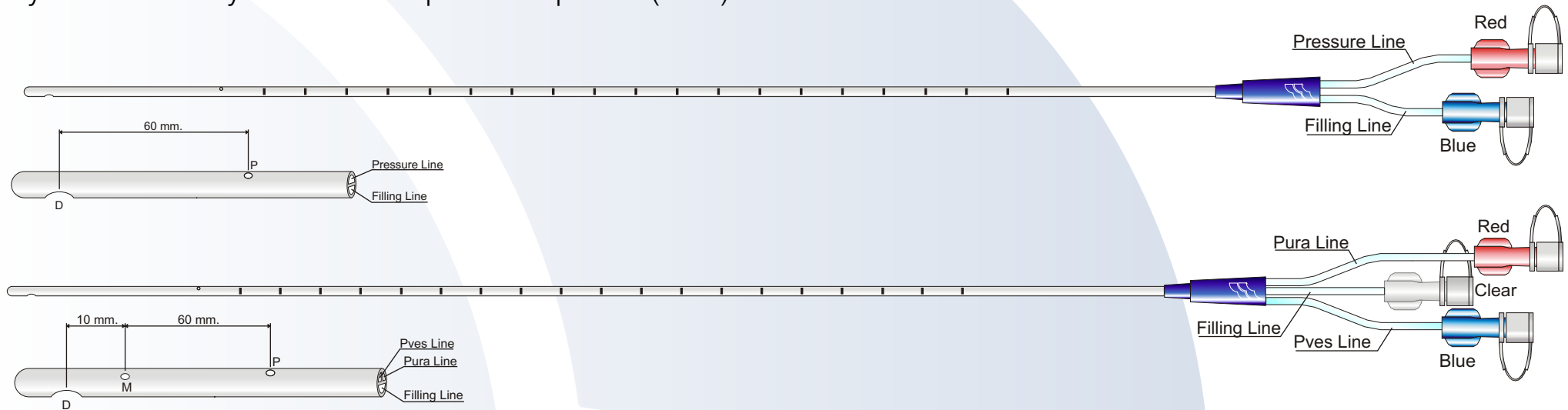

Codice Order number	Diametro Size	Lunghezza Length	Numero di lumi Lumens number	Distanza tra i fori Distance between holes	Quantità per confezione Package quantity
MBP5061	6 Fr (2mm)	400 mm	Two	50 mm	10
MBP5081	8 Fr (2,67mm)	400 mm	Two	50 mm	10
MBP5101	10 Fr (3,33mm)	400 mm	Two	50 mm	10
MBP5891	9 Fr (3mm)	400 mm	Three	10 mm 50 mm	10

- Cateteri a due lumi in PVC: il lume indicato in figura con **Filling line** si apre in prossimità della punta con un unico foro "D" (distale) ad asola. Il lume indicato in figura con **Pressure line** si apre con uno (cateteri da 6 Fr) o due (cateteri da 8 Fr, 9Fr, 10Fr, 12 Fr) fori circolari, radiali, "P". Centimetratura a partire dal/i foro/i prossimale/i.

Raccordi Luer lock femmina in codice colore con tappino:

- **Blu** per il riempimento vescicale;
- **Rosso** per il rilevamento della pressione vescicale.

- Catetere a tre lumi in PVC per il riempimento vescicale e la registrazione contemporanea della pressione uretrale e vescicale. Il lume indicato in figura con **Filling line** si apre in prossimità della punta con un foro ad asola "D"; quello indicato in figura con **Pves line** si apre con un foro circolare "M" posto a 10 mm dal foro "D", quello indicato in figura con **Pura line** si apre anch'esso con un foro circolare "P" posto a 60 mm dal foro "M". Centimetratura a partire dal foro "P".

Raccordi Luer lock femmina in codice colore con tappino:

- **Rosso** per il rilevamento della pressione uretrale;
- **Blu** per il rilevamento della pressione vescicale;
- **Incolore** per il riempimento vescicale.

Sterile e monouso

- Double lumen, PVC, catheters: the lumen indicated in figure with **Filling line** opens near the tip with one large sideport "D". The lumen indicated in figure with **Pressure line** opens with one (6 Fr catheters) or two (8 Fr, 9 Fr, 10Fr, 12 Fr catheters) circular, radial holes "P". Centimeter graduations from the proximal "P" hole/holes.

Female Luer lock color code connectors with cap:

- **Blue** for bladder filling;
- **Red** for bladder pressure.

- Triple lumen, PVC, catheter: the lumen indicated in figure with **Filling line** opens near the tip with a side port "D". The lumen indicated in figure with **Pves line** opens with a round hole "M" at 10 mm from the hole "D". The lumen indicated in figure with **Pura line** opens with a round hole "P" at 60 mm from the hole "M". Centimeter graduations from the hole "P".

Female Luer lock color code connectors with cap:

- **Red** for urethral pressure;
- **Blue** for bladder pressure;
- **Clear** for bladder filling.

Sterile and disposable.