


Cateteri a due lumi per Studio Pressione/Flusso (PFS) e cistomanometria

Double lumen catheters for Pressure/Flow Study (PFS) and cystomanometry

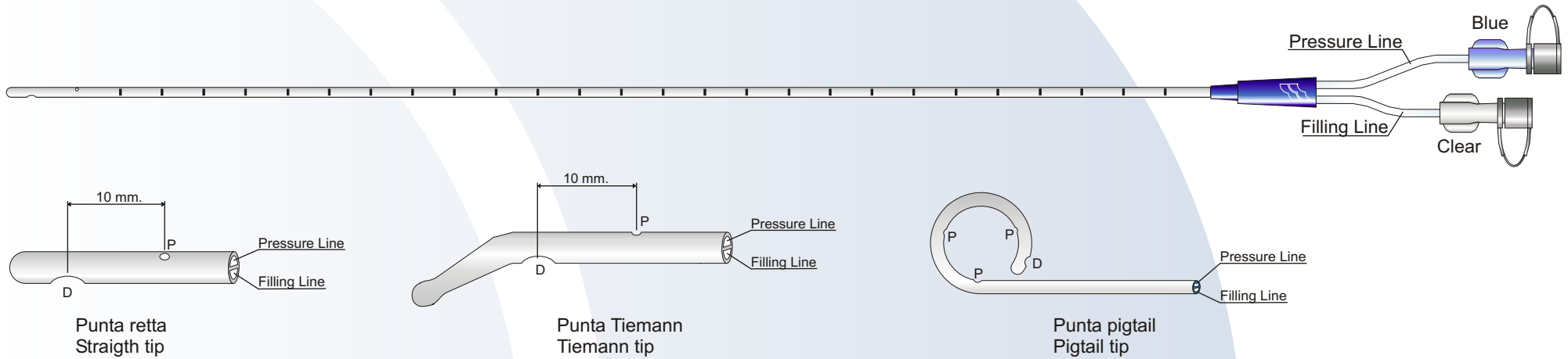

Codice Order number	Diametro Size	Lunghezza Length	Tipo Punta Tip	Stiletto Stylet	Marker Radiopaco Radiopaque marker	Materiale Material	Quantità per confezione Package quantity
MBP5261	6 Fr (2mm)	400 mm	Retta - Straigh	NO	NO	PVC	10
MBP5281	8 Fr (2,67mm)	400 mm	Retta - Straigh	NO	NO	PVC	10
MBP5301	10 Fr (3,33mm)	400 mm	Retta - Straigh	NO	NO	PVC	10
MBP5381	8 Fr (2,67mm)	400 mm	Retta - Straigh	NO	SI - YES	PVC	10
MBP5481	8 Fr (2,67mm)	400 mm	Tiemann	NO	NO	PVC	10
MBP5501	10 Fr (3,33mm)	400 mm	Tiemann	NO	NO	PVC	10
MBP5661	6 Fr (2mm)	400 mm	Pigtail	SI - YES	NO	Pebax	10

Cateteri con punta retta e punta Tiemann. Il lume indicato in figura con **"Filling line"** si apre in prossimità della punta con un unico foro **"D"** (distale) ad asola. Il lume indicato in figura con **"Pressure line"** si apre con un foro circolare, **"P"** posto a 10 mm dal foro distale. Centimetratura a partire dal foro **"P"** (prossimale).

Cateteri con punta Pigtail. Il lume indicato in figura con **"Filling line"** si apre in prossimità della punta con un unico foro **"D"** (distale) ad asola. Il lume indicato in figura con **"Pressure line"** si apre con 3 fori circolari, **"P"**. Centimetratura a partire dalla base del ricciolo. Il catetere, inoltre, è munito di uno speciale stiletto ad estremità rastremata per permetterne un'introduzione atraumatica.

Raccordi Luer Lock femmina in codice colore con tappino:

- **incoloro** per il riempimento vescicale,
 - **blu** per il rilevamento della pressione vescicale.
- Sterile e monouso.

Straigh and Tiemann tip catheters. The lumen indicated in figure with **"Filling line"** opens near the tip with one large sideport **"D"** (distal). The lumen indicated in figure with **"Pressure line"** opens with one circular hole **"P"** (proximal) at 10 mm from the distal sideport. Centimeter graduations from the proximal hole **"P"**.

Pigtail tip catheter. The lumen indicated in figure with **"Filling line"** opens near the tip with one large sideport **"D"** (distal). The lumen indicated in figure with **"Pressure line"** opens with three radial, circular holes **"P"** (proximal). The catheter is provided with a special stylet, with tapered end, for an easy, atraumatic insertion. Centimeter graduations from the base of the Pigtail end. Centimeter graduations from the proximal hole.

Luer Lock female connectors in color code with plug:

- **clear** for bladder filling,
 - **blue** for bladder pressure.
- Sterile and disposable.