



DANFLOW™ 3000 PLUS

En trådlös urinflödesmätare direkt till datorn


DanFlow™ 3000 Plus är ett modernt system för flödesmätningar som installeras på en av era sjukhusdatorer och är mycket enkelt att använda. Du anger patientens namn och personnummer i DanFlow3000Plus programmet och kan sedan se patientens flödeskurva direkt på skärmen. Du slipper alla utskrifter på termoskrivare och kan i stället skriva ut rapporten direkt till en PDF-rapport på er server eller på vanlig skrivare.

Flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (866 MHz) direkt till din dator och en komplett miktionsrapport sparas som PDF-rapport i en mapp som du själv anger. Denna rapport kan sedan importeras i de flesta moderna journalsystem.

Flödesgivaren i DanFlow™ 3000 Plus systemet har ett litiumbatteri som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca två år. Flödesgivaren kan användas med ett höj- och sänkbart miktionsstativ, men kan även ställas direkt på golvet under en miktionsstol och tratt. Till miktionsstolen finns det möjlighet att fästa ett sparkskydd för att minimera risken för artefakter.

DanFlow™ 3000 Plus har följande fördelar:

- Batteridriven, trådlös flödesmätare med lång drifttid
- Lång räckvidd mellan flödesgivare och huvudenhet upp till 50 meter
- Patientens flödesmätning visas on-line på din dator och markörer kan justeras för att eliminera artefakter
- Rapporter i PDF-format skapas automatiskt och gör det möjligt att direkt lagra data direkt i ert journalsystem

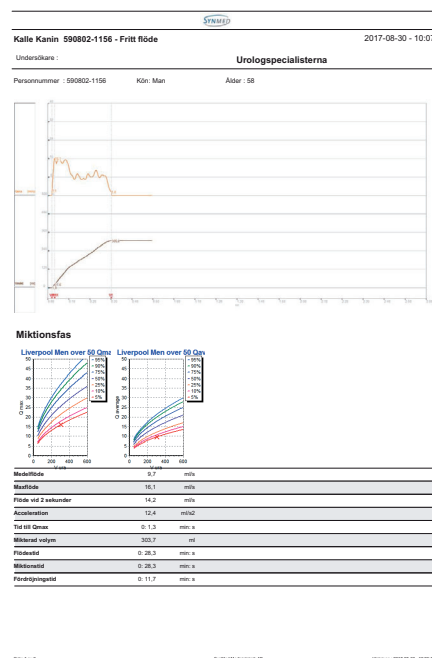

SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgratan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

