



DANFLOW™ 3000 PLUS

Et moderne og trådløst flowapparat direkte til din datamaskin


DanFlow™ 3000 er et moderne og meget brukervennlig system for urin flow-måling installert på din datamaskin. Pasientens navn og personnummer angis i programmet DanFlow™ 3000 og flowkurven til pasienten vises direkte på dataskjermen. Rapporten skrives ut direkte til en PDF-rapport på serveren eller på en vanlig printer, du slipper utskrift på termoskriver.

Data fra flowmåleren overføres med et unikt, trådløst kommunikasjonsprotokoll (866 MHz) direkte til din datamaskin og en komplett flowrapport lagres som PDF-rapport i en egen angitt mappe. Rapporten kan importeres i de fleste moderne journalsystem.

DanFlow™ 3000 har et litiumbatteri som ikke må lades og med varighet på cirka to år ved normal bruk. Flowmåleren kan brukes med et hev- og senkbart stativ, men også stå direkte på gulv under en toalettstol og trakt. Til toalettstolen kan festes en sparkbeskyttelse for å minimere risikoen for artefakter.

DanFlow™ 3000 Plus har følgende fordeler:

- Batteridrevet, trådløs flowmåler med lang driftstid
- Rekkevidde på opptil 50 meter mellom flowmåler og hovedenhet
- Flowkurven vises parallelt på dataskjermen og markører kan justeres for å eliminere artefakter
- Rapporter i PDF-format muliggjør lagring direkte i journalsystemet

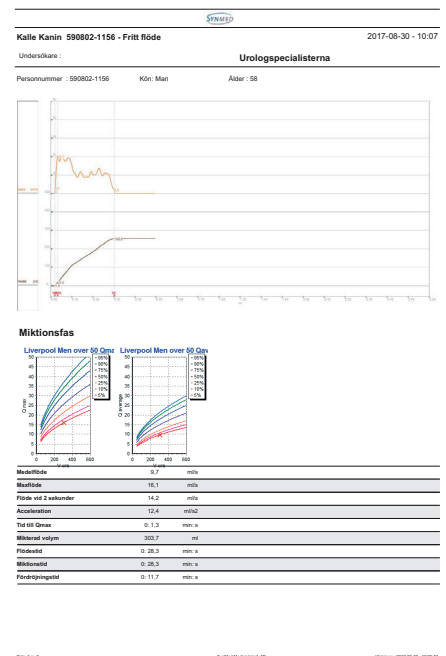

SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

