



# DANFLOW™ WAVE

En trådlös urinflödesmätare direkt till datorn


DanFlow™ Wave är ett modernt system för flödesmätningar som installeras på en av era sjukhusdatorer och är mycket enkelt att använda. Du anger patientens namn och personnummer i programmet UDMvision och kan sedan se patientens flödeskurva direkt på skärmen. Du slipper alla utskrifter på termoskrivare och kan i stället skriva ut rapporten direkt till en PDF-rapport på er server eller på vanlig skrivare.

Flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (868 MHz) direkt till din dator och en komplett miktionsrapport sparas som PDF-rapport i en mapp som du själv anger. Denna rapport kan sedan importeras i de flesta moderna journalsystem.

Flödesgivaren i DanFlow™ Wave systemet har två litiumbatterier som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca 9-12 månader. Flödesgivaren kan användas med ett höj- och sänkbart miktionsstativ, men kan även ställas direkt på golvet under en miktionsstol och tratt. Till miktionsstolen finns det möjlighet att fästa ett sparkskydd för att minimera risken för artefakter.

## DanFlow™ Wave har följande fördelar:

- Batteridriven, trådlös flödesmätare med lång drifttid
- Lång räckvidd mellan flödesgivare och huvudenhet upp till 50 meter
- Patientens flödesmätning visas on-line på din dator och markörer kan justeras för att eliminera artefakter
- Rapporter i PDF-format skapas automatiskt och gör det möjligt att direkt lagra data direkt i ert journalsystem

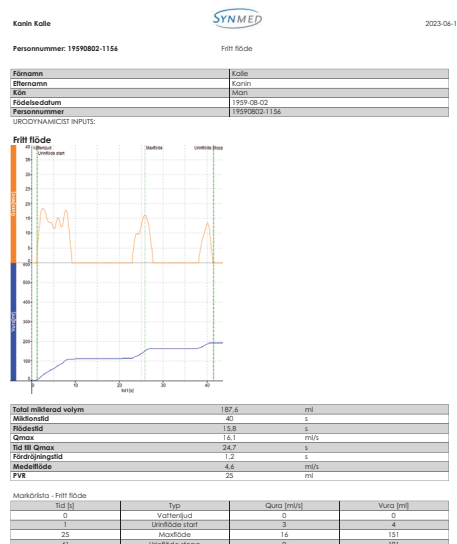

SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Ladulåsgratan 65  
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
Medkonsult M T s.r.o.  
www.mmtsyste.ms.com  
info@mmtsyste.ms.com

