

DANFLOW™ WAVE CU

En modern, trådlös urinflödesmätare


DanFlow™ Wave CU är ett modernt system för urinflödesmätning som är mycket enkelt att använda. Den vattentäta flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (868 MHz) till huvudenheten med inbyggd termoskrivare. En komplett miktionsrapport skrivs ut direkt där både flöde och volym visas i en och samma kurva.

Flödesgivaren i DanFlow™ Wave CU systemet har två litiumbatterier som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca 9-12 månader. Flödesgivaren kan användas med ett höj- och sänkbart miktionsstativ, men kan även ställas direkt på golvet under en miktionsstol och tratt. Till miktionsstolen finns det möjlighet att fästa ett sparkskydd för att minimera risken för artefakter.

Huvudenheten i DanFlow™ Wave CU systemet är utrustad med ett SD-minneskort där alla undersökningar sparas automatiskt. Flödesmätningarna kan då enkelt överföras till din dator och konverteras till PDF-format om du vill skriva ut undersökning på arkivbeständigt A4-papper.

DanFlow™ Wave CU har följande fördelar:

- Enkel och intuitiv huvudenhet som kan placeras på bord, hylla eller direkt på väggen
- Vattentät, trådlös flödesmätare med lång drifttid
- Lång räckvidd mellan flödesgivare och huvudenhet upp till 50 meter
- Flödesmätningssrapport som visar både flöde och volym i samma kurva
- Enkelt att överföra rapporter till dator i PDF-format för lagring eller utskrift

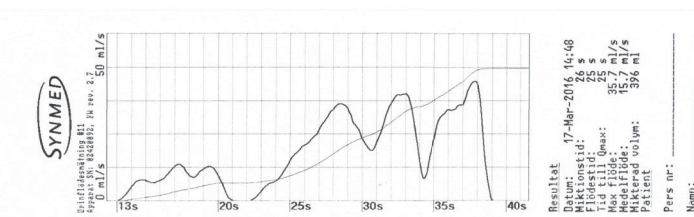

SynMed Medicinteknik AB
 Magnus Ladulåsgratan 65
 118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
 www.synmed.se
 info@synmed.se

Tillverkad av:
 Medkonsult M T s.r.o.
 www.mmtsystems.com
 info@mmtsystems.com

