

DANFLOW™ 1100

En modern, trådlös urinflödesmätare



DanFlow™ 1100 är ett modernt system för urinflödesmätning som är mycket enkelt att använda. Flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (866 MHz) till huvudenheten med inbyggd termoskrivare. En komplett miktionsrapport skrivs ut direkt där både flöde och volym visas i en och samma kurva.

Flödesgivaren i DanFlow™ 1100 systemet har ett litiumbatteri som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca två år. Flödesgivaren kan användas med ett höj- och sänkbart miktionsstativ, men kan även ställas direkt på golvet under en miktionsstol och tratt. Till miktionsstolen finns det möjlighet att fästa ett sparkskydd för att minimera risken för artefakter.

Huvudenheten i DanFlow™ 1100 systemet är utrustad med ett SD-minneskort där alla undersökningar sparas automatiskt. Flödesmätningarna kan då enkelt överföras till din dator och konverteras till PDF-format om du vill spara undersökningen direkt i ert patientjournalssystem eller skriva ut den på arkivbeständigt A4-papper.

DanFlow™ 1100 har följande fördelar:

- Enkel och intuitiv huvudenhet som kan placeras på bord, hylla eller direkt på väggen
- Batteridrivna, trådlösa flödesmätare med lång drifttid
- Lång räckvidd mellan flödesgivare och huvudenhet upp till 50 meter
- Flödesmätningssrapport som visar både flöde och volym i samma kurva
- Enkelt att överföra rapporter till dator i PDF-format för lagring eller utskrift

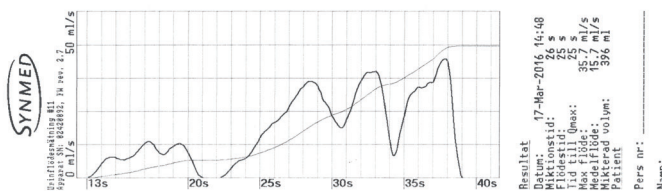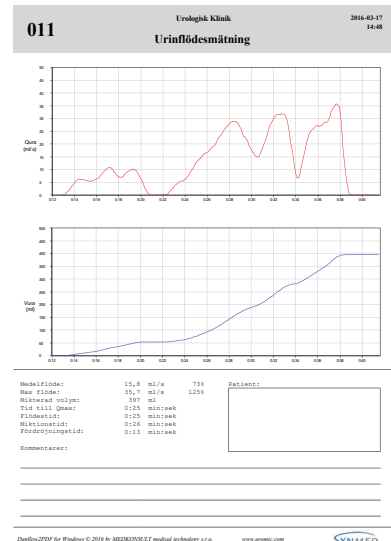

SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgratan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

